


BEWEEGBARE BODEM

BEPAAAL ZELF DE GEWENSTE DIEPTE MET EEN BEWEEGBARE BODEM

WATER DOORLAATBAAR OPPERVLAK

Zwembadwater stroomt ongehinderd door het oppervlak dankzij de zeer goede doorlaatbaarheid van de vloer. Dus:

- ♥ Optimale water hygiëne
- Ongehinderde watercirculatie
- ⌚ De vloer beweegt sneller door het water

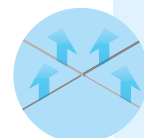

WATER HYDRAULIEK

Water hydrauliek betekent geen risico op vervuiling van gevaarlijke vloeistoffen

MINIMALE BOUWDIKTE

Met een totale bouwdikte van 30 cm is dit de dunste vloer in de markt

MAXIMAAL AAN TE PASSEN

- Underwaterloopband
- Underwaterfiets
- Obstacle course
- Underwatercamera's
- Counter Current
- Underwatermassage
- Zelf regulerende trap

VEILIG

- Sterk RVS 316 frame
- Veilig antislip oppervlak
- Water doorlaatbaar over het gehele oppervlak
- Veilige water-hydrauliek

KLEUR TEST

Doorstaat als enige de EN15288-2:2008 annex A kleur test

KWALIFICATIES

- Gecertificeerd als Klasse 1 Medisch apparatuur
- ISO 9001:2015 gecertificeerde fabrikant
- ISO 13485:2012 gekwalificeerd leverancier

OVERAL TE INSTALLEREN

Kan zowel in een bestaand als nieuw bad geïnstalleerd worden

Extra voordelen

1 Klaar voor gebruik in 1 week

Optimale water hygiëne

25+ Jaren levensduur

1 Eén centraal punt voor Hydrotherapie

Gemakkelijk te onderhouden

80% recyclebaar materiaal

Geen gevaarlijke vloeistoffen

1000+ projecten wereldwijd

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard

EWAC MEDICAL
We get you moving

Wijzigingen voorbehouden

+31 (0)226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.nl

EWAC MEDICAL
We get you moving

www.ewacmedical.nl

BEWEEGBARE BODEM VOOR HYDROTHERAPIE



Wij geloven dat de therapeut optimale omstandigheden moet kunnen creëren voor de patiënt als het gaat om revalidatie in het water. Het kunnen aanpassen van de diepte is één van de belangrijkste factoren om dit te kunnen realiseren.

Met die reden heeft EWAC Medical een beweegbare zwembadbodem ontwikkeld, speciaal voor medische toepassing. Ons ontwerp heeft een ongekende waterdoorlatendheid en is daarom de meest hygiënische zwembadbodem op de markt! Dit is vooral belangrijk bij het behandelen van kwetsbare patiënten.

Bij Hydrotherapie is het belangrijk dat de diepte van het bad afgestemd kan worden op de behoefte van de patiënt. Aspecten als leeftijd, lengte en vooral de vorderingen van de patiënt zijn belangrijke factoren voor het bepalen van de juiste diepte voor revalidatie. Met de beweegbare zwembad bodem kan de diepte, met één druk op de knop, gemakkelijk aangepast worden. De bodem kan relatief snel omhoog gebracht worden tot aan de rand van het bad zodat het bad zeer toegankelijk is voor de patiënt.



Veelzijdig

De EWAC Medical beweegbare zwembadbodem is het meest veelzijdige product op de markt. Zo kunnen wij de bodem in elk bad plaatsen, ongeacht de afmetingen. Ook kunnen wij bestaande baden uitrusten met een beweegbare bodem. De bodem kan uitgerust worden met de geïntegreerde Pooltrack® onderwaterloopband om loopoefeningen te faciliteren. Daarnaast bieden wij een breed scala aan accessoires voor loop- en fietsoefeningen en balans- en valpreventietrainingen. De beweegbare bodem maakt het bad uiterst geschikt voor Hydrotherapie.

Bij nieuwe baden is het mogelijk om onderwatercamera's en verlichting toe te passen en door het gebruik van straalstroom-, tegenstroom- en onderwatermassage systemen kunnen de mogelijkheden voor de therapeut aanzienlijk worden vergroot.

Ons zeer veelzijdige modulaire bad kan uitermate snel geïnstalleerd worden zonder intensieve bouwwerkzaamheden op locatie. In combinatie met de beweegbare bodem is dit dé oplossing om Hydrotherapie te kunnen bieden.



Hygienisch

Onze beweegbare bodem voldoet aan de meest strikte reglementen voor water-hygiëne. Zo is ons systeem het enige systeem dat voldoet aan de European EN 15288:2008, annex A kleur-test. Dit houdt in dat de aanwezigheid van de beweegbare bodem geen effect heeft op de watercirculatie in het bad. Hierdoor blijft het optimale niveau van de hygiëne en desinfectie van het water gewaarborgd.



Veilig

Onze beweegbare bodem heeft een zeer sterk, roestvrij stalen, AISI 316 L frame met een veilig antislip oppervlak van polyester. Het water kan vrij door het oppervlak heen bewegen zodat de circulatie optimaal verdeeld blijft.



Veilige water-hydrauliek

Het bewegen van de bodem wordt gerealiseerd door gebruik van veilige water-hydrauliek. In vergelijking met olie-hydrauliek biedt dit systeem ongekende bescherming tegen vervuiling van het water omdat er geen giftige hydraulische vloeistoffen in het water terecht kunnen komen.



Makkelijk te onderhouden

Alle mechanische onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk vanaf het vloeroppervlak. Schoonmaak

en onderhoud kan al gedaan worden door het weghalen van enkele vloerpanelen. In tegenstelling tot vergelijkbare producten, is het niet nodig om een team van duikers in te huren om het onderhoud te plegen en bespaard het aanzienlijk in de kosten.



Milieuvriendelijk

Wij maken voor meer dan 80% gebruik van recyclebare materialen. Tegelijkertijd zorgt de beweegbare bodem er voor dat er energie bespaard kan worden. Door de bodem omhoog te brengen tot aan de rand ontstaat er een afdekking van het bad hetgeen niet alleen de verdamping van het water tegengaat maar ook het verlies van warmte. Dit verlaagt de uitstoot van CO₂ en het verhoogd het behoud van warmte.



Accessoires

De Beweegbare bodem kan uitgerust worden met een breed scala aan accessoires waarmee het revalidatieproces van de patiënt ondersteund kan worden. Het geeft de therapeut meerdere mogelijkheden en het zorgt voor plezier en beleving tijdens de revalidatie.





Beweeg-accessoires

- Pooltrack® Onderwaterloopband
- Pooltrack® Onderwaterfiets
- Pooltrack® Obstacle course
- Verwijderbare loop railing
- Hand railing




Trainings-accessoires

- Aqua fins
- Aqua dumbbells
- Aqua noodles

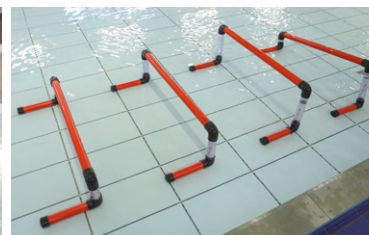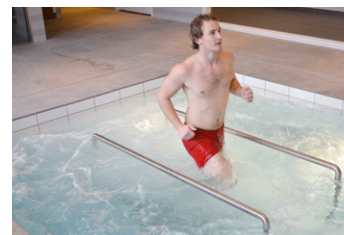


Toegankelijkheid:

- Luie trap (de treden passen zich automatisch aan de diepte van de vloer aan)
- Geleidelijk aflopende helling (gemakkelijke toegang voor patiënten in een rolstoel)

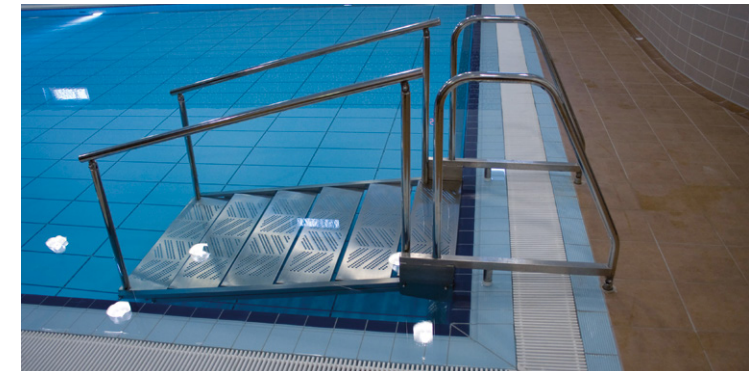

Mobiliseren van de patiënt:

- Plafondlift
- Mobiele stoel
- Stretcher / Trolley
- Bad lift

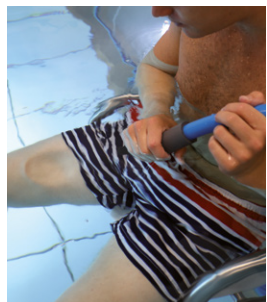

EWAC Medical is door Lloyd's Register gecertificeerd volgens de maatstaven van de ISO 9001 en ISO 13458. EWAC Medical heeft hierdoor voorrecht om Klasse I Medische producten, volgens The European Medical Device Directive, te mogen ontwikkelen, fabriceren en testen.

EWAC Medical is gecertificeerd volgens:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

door Lloyd's Register Nederland

