

MEDISCHE SYSTEMEN

HYDROTHERAPIE

GEBRUIK MAKEN VAN DE GENEZENDE EIGENSCHAPPEN VAN WATER.

EWAC

MEDICAL

We get you moving



Inhoud



Automatische onderwater
massagebaden



Combinatie-apparatuur voor
onderwatermassages,
elektrogalvanische baden of CO2
drooggasbaden

Vlinderbaden




Onderwater tractie systemen

Medische baden



Colonale irrigatie-apparatuur

Arm- en beenbaden

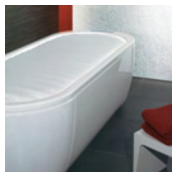

Douches


Droogdrijfsystemen



Systemen voor peloiden

Lifters

Brandwondenbehandelingsbaden

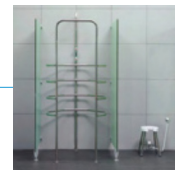




AUTOMATIC MASSAGE TUB VITALITY



TECHNISCHE GEGEVENS

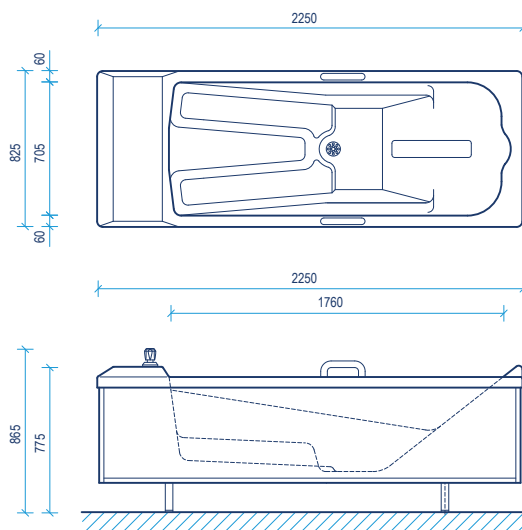

Technische wijzigingen voorbehouden.

VITALITY LUXURY

MODELLEN	VITALITY 1.5-15	LUXURY 1.5-1F
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN		
Automatische onderwatermassages	•	–
Wervel massages	–	•
Manuele onderwatermassages	o	o
Lucht-bubbelbaden	o	–
Gebruik van badzout en oliën (aromatherapie)	•	•
Chromotherapie	o	o
STANDAARDUITRUSTING, OPTIONELE UITRUSTING EN ACCESSOIRES		
MASSAGE SYSTEEM		
Aantal behandelde lichaamszones	14	12
Aantal zonegroepen	5	1
Aantal waterstralen	140	16
Aantal luchtsproeiers (optioneel)	(50)	–
Manuele onderwater massage-uitrusting	o	o
Apparatuur voor buikmassage	o	–
Apparatuur voor cervicale wervelkolommassage	o	–
LICHT-EFFECTEN		
Starlight-effect met 146 onderwaterlichtpunten	o	o
Highlight-effect met 6 onderwaterlichtpunten	o	o
BEDIENING EN HYGIËNE		
Goed ontworpen bedieningspaneel	•	•
Individuele programmering van het massageverloop	•	–
Programmering van de behandelingsduur	•	•
Automatisch vullen van de kuip	o	o
Automatische lediging van de kuip	o	–
Vulinrichting voor agressief water	o	o
Manometer om de massagedruk aan te geven	o	–
Automatisch spoelsysteem	•	•
VERDERE OPTIES / ACCESSOIRES		
Handrails om het in- en uitstappen te vergemakkelijken	•	•
Hoofdkussen	o	o
Pneumatische voetsteun	•	•
Instaptrede (één trede)	o	o
Ondergrondmateriaal voor individuele betegeling	o	o
TECHNISCHE GEGEVENS		
Afmetingen in mm (L x B x H)	2250 x 825 x 690	2000 x 825 x 620
Elektrische aansluiting	400 V~, 50 Hz, 2,3 kW	230 V~, 50 Hz, 2,3 kW

• standaarduitrusting | o optionele uitrusting / optionele accessoires | Technische wijzigingen voorbehouden.

Voor bijkomende modellen, raadpleeg de productlijn Spa Sensations.


VITALITY and LUXURY - systemen voor automatische onderwatermassages.

Gemakkelijk te bedienen, eersteklas behandelingskwaliteit. VITALITY – het bad voor volautomatische onderwatermassages - is uitgerust met 140 jets. Het massageprogramma volgt nauwgezet de




volgorde van een klassieke hydrotherapeutische massage. 5 verschillende zones die in totaal 14 lichaamszones bestrijken, worden achtereenvolgens behandeld. Elke massage kan individueel worden geprogrammeerd: elke zonegroep kan worden behandeld worden, en massagedruk en behandeltijd kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

Het luchtbubbelbad* en het Starlight Effect* met 146 lichtpunten in acht verschillende kleuren 146 lichtpunten in acht verschillende kleuren dragen ook bij aan uw ontspanning en genot.


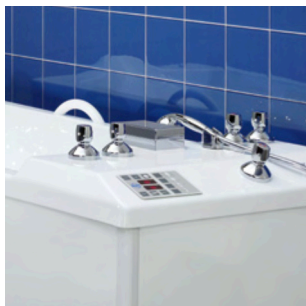


LUXURY is een systeem voor whirlmassages dat naar keuze kan worden gebruikt als een krachtige op zichzelf staande watermassage of als voorbereiding op volgende behandelingen. Omdat de luchttoevoer naar de massagejets nauwkeurig kan worden ingesteld, is LUXURY ook geschikt voor het inhaleren van therapeutisch werkzame aërosolen.

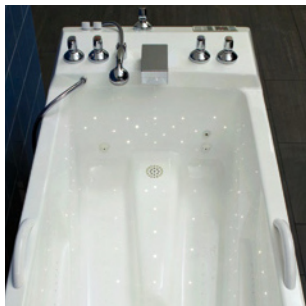

Bij de ontwikkeling van VITALITY en LUXURY hebben we veel aandacht besteed aan het minimaliseren van geluidsemissies om een ontspannende massage ervaring te garanderen. De kuipen, die bestaan uit acrylglas, zijn naadloos gevormd en hun binnenvorm is ergonomisch ontworpen.

LUXURY

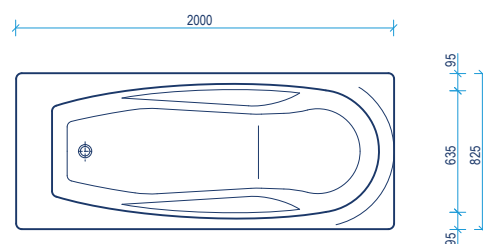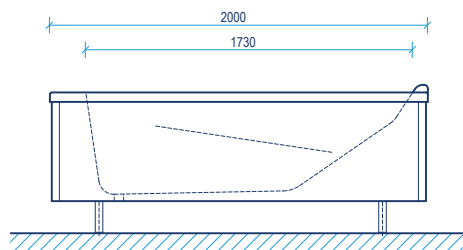

Technische wijzigingen voorbehouden.

* Optional feature




MASSAGE BAD LUXURY





COMBINATIE-APPARATUUR 0.10-0

TECHNISCHE GEGEVENS

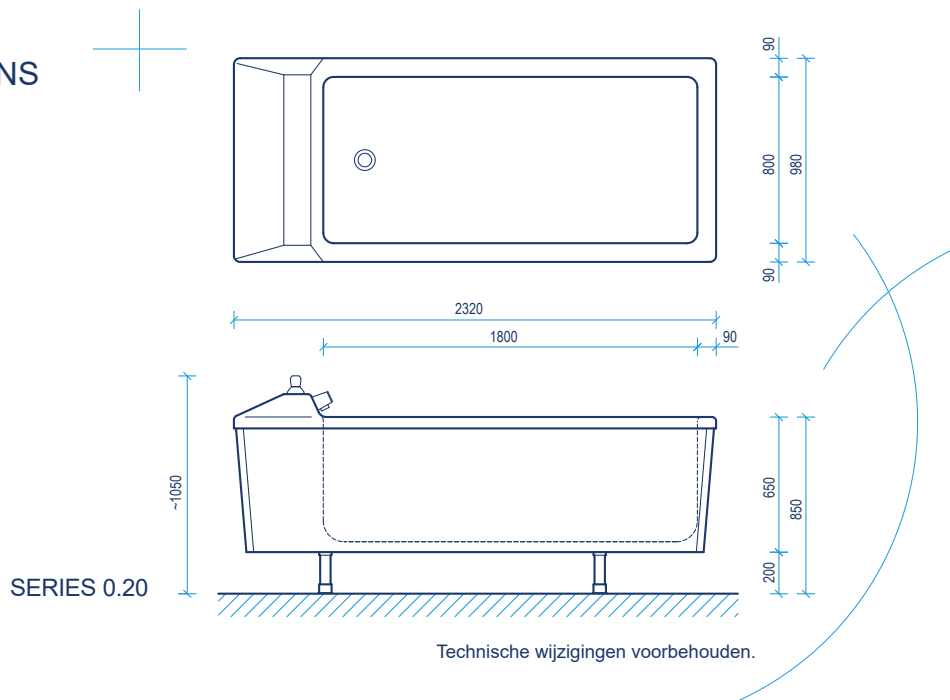

COMBINATIE APPARATUUR

MODELLEN	0.10-0	0.10-1	0.20-3	0.20-6	0.20-8	0.20-9
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN						
Manuele onderwatermassages	•	•	–	•		
Automatische onderwatermassages	–	–	–		•	•
Electrogalvanische baden	–	•	–	•	–	•
CO2 drooggasbaden	–	–	•	•	–	–
Luchtbubbelbaden	–	–	o	o	•	•
Onderwater tractie	–	–	o	o	o	o
STANDAARDUITRUSTING, OPTIONELE UITRUSTING EN ACCESSOIRES						
ONDERWATER DRUKSTRAAL MASSAGE						
Wervelende massagestralen	o	o	–	o	–	–
Roterende massagestraal	o	o	–	o	o	o
ELECTROGALVANISCHE BEHANDELINGEN						
Aantal elektroden	–	8	–	8	–	8
Extra elektrode / elektrische massageborstel	–	o	–	o	–	o
Aantal programma's voor electrogalvanische baden	–	22	–	22	–	22
Aantal verschillende therapeutische stromen	–	8	–	8	–	8
BEHANDELING EN HYGIËNE						
Bediening met LCD-display en éénknopsbediening	–	•	–	•	–	•
Bedieningspaneel	•	–	•	–	•	–
Automatische badvulling	–	–	o	o	o	o
Uitrusting voor agressief water	o	–	o	o	o	o
Ontsmettingsuitrusting	o	o	–	o	o	o
VERDERE OPTIES / ACCESSOIRES						
Starre hoofdsteun	o	o	–	–	•	•
Adjustable headrest	o	o	•	•	o	o
Handrails	•			•		
Verstelbare hoofdsteun	o	o	o	o	o	o
Rugleuning	o	o	–	o	o	o
Positioneergordel	o	o	o	o	o	o
Deur	–	–	o	o	–	–
Trap (twee treden)	o	o	o	o	o	o
TECHNISCHE GEGEVENS						
Afmetingen in mm (L x B x H)	2100 x 980 x 850		2320 x 980 x 850			

• standaarduitrusting | o optionele uitrusting / optionele accessoires | Technische wijzigingen voorbehouden.
 Voor bijkomende modellen, raadpleeg de productlijn Spa Sensations.

Combinatie-apparatuur- voor onderwatermassages, elektrolytische baden of CO2-drooggasbaden.

Perfect geschikt voor therapeutische eisen. Combinatie-apparatuur kan individueel worden aangepast voor verschillende hydrotherapeutische toepassingen.





Krachtige manuele onderwater massage apparatuur is beschikbaar voor therapeutische massages. Verschillende behandelingen kunnen worden aangevuld met een verkwikkend luchtbubbelbad en automatische onderwater drukstraal massages.



Combinatie-apparatuur kan worden gemonteerd voor elektrogalvanische baden met tot acht verschillende stroominstellingen. De faciliteit wordt bediend. De installatie wordt bediend via een zeer gebruiksvriendelijk scherm: de juiste elektro-galvanische behandeling kan worden geselecteerd uit 22 voorgeprogrammeerde opties of op individuele basis worden geselecteerd.



De CO2 drooggasbaden zijn voorzien van een compleet systeem met een stoomgenerator, afzuigapparatuur en badafdekking. Het verloop van de behandeling en het evacuatieproces van het carbon dioxide na afloop kan automatisch worden geregeld. De romp van de kuip bestaat uit hoogwaardig acrylglas en kan gemakkelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd. De kuipen kunnen snel worden gevuld en worden snel geleegd, wat bijdraagt tot een efficiënte dagelijks gebruik.

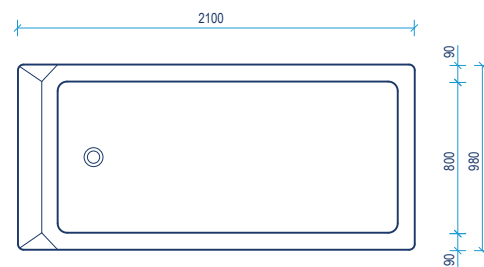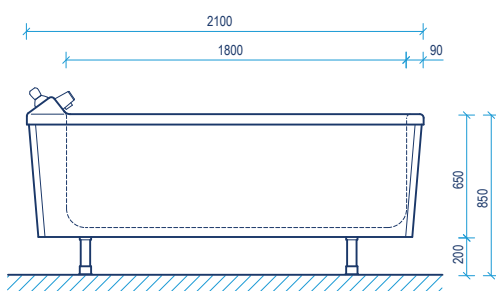

SERIES 0.10

Technische wijzigingen voorbehouden.



MODEL 0.10-1



MODEL 0.20-6

Vlinderbaden - voldoende ruimte voor onderwateroefeningen.

Voor optimale therapeutische werkomstandigheden.




Met een binnenlengte van 190 cm en een maximale breedte van 203 cm is de vlinderkuip ideaal voor fysiotherapie en onderwater oefeningen. Door de vlindervorm en de comfortabele hoogte van 86 cm kan de therapeut de patiënten gemakkelijk ondersteunen.



De verschillende behandelmogelijkheden van de vlinderkuip worden gecompleteerd aangevuld met extra uitrusting en installatiemogelijkheden: dit omvat krachtige handmatige onderwater massage apparatuur, luchtbubbelsystemen, onderwater tractie* of elektrogalvanische baden.



Het badoppervlak bestaat uit hoogwaardig acrylglas en biedt vele voordelen: De hoge kwaliteit van het bad helpt het duurzaam, de watertemperatuur kan lang worden gehandhaafd en de kuip kan gemakkelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het automatisch vulprogramma** en de grote toevoer- en afvoerleidingen zorgen voor een vlot behandlungsproces. Een breed gamma accessoires zoals steungrepen of opstapjes, positioneringsgordels, voet- en rugsteunen voldoen aan uw behoeften bij het werken met de vlinderbad.

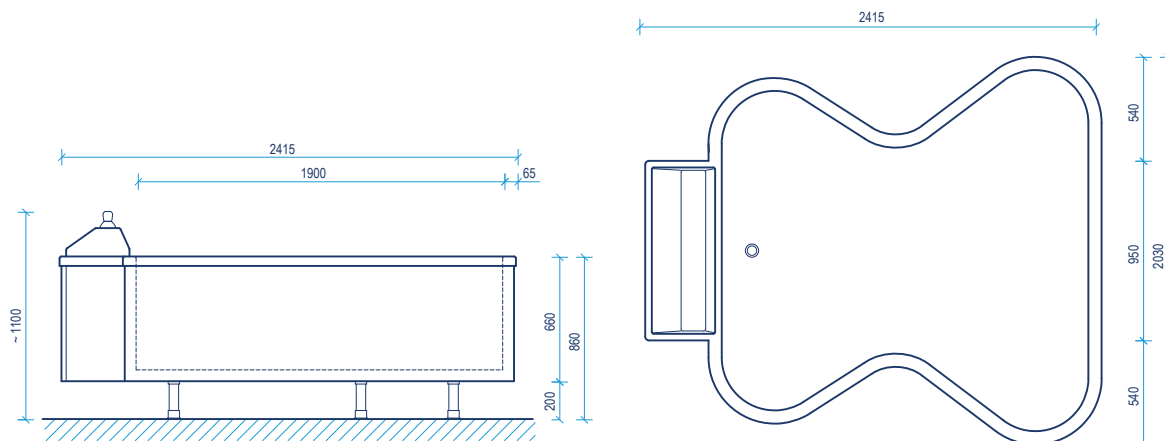

Technical modifications reserved



VLINDERBAD



Medische baden - voor water-toepassingen.

De kuipen met de perfecte vorm en uitrusting voor al uw therapeutische behoeften.


De kuipen met de perfecte vorm en uitrusting voor al uw therapeutische behoeften. Onze medische



kuipen zijn perfect voor alle verschillende soorten behandelingen, het verbeteren van het comfort van de patiënten en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De vorm van het bad is een belangrijk criterium. Als het comfort van de patiënt een het belangrijkste is, zal een ergonomische kuip met een achteroverleunende rugleuning en voorgevormde armsteunen uw eerste keuze zijn. De thermische kuip is zo ontworpen dat de behandlingsmedia tijdens het vulproces voorzichtig worden gehanteerd.





De inrichting van de medische baden kan aan uw behoeften worden aangepast. Er zijn armaturen voor thermaal water, vers water en koolzuurhoudend water; de toevoerleidingen voor het koolzuurhoudende water kunnen ook laag in de kuip worden aangebracht om verlies van koolzuur te voorkomen. Pure-zuurstof* of luchtbubbelbaden* kunnen ook worden gebruikt, afhankelijk van de behandeling. Carbonatieapparaten*, CO₂*- of O₂-reducerstations* zijn beschikbaar voor de bereiding van meerdere soorten water.

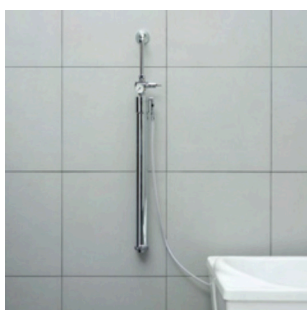

Alle baden bestaan uit acrylglas van hoge kwaliteit. Het gladde oppervlak van de kuip is duurzaam en gemakkelijk te reinigen. De grote afvoeren en aansluitingen en een automatische* vulfunctie verbeteren de hand- en gebruiksvriendelijkheid.

MODEL 1.5-3

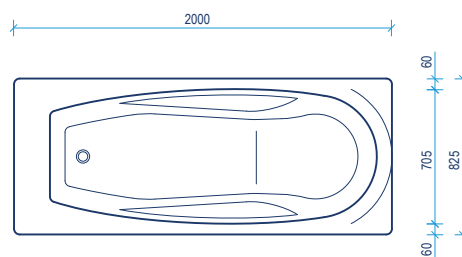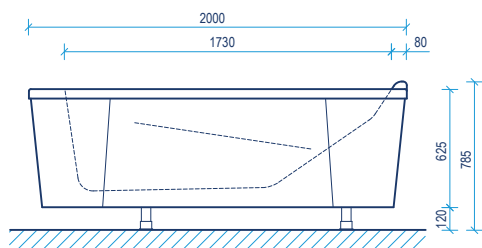

Technische wijzigingen voorbehouden.



MEDISCHE BADEN 1.4-2



MEDISCHE BADEN 1.5-3

Arm- en beenbaden - voor plaatselijke hydrotherapeutische behandelingen.

Het perfecte systeem voor elke soort behandeling.



Wij bieden een uitgebreid assortiment aan systemen en apparatuur voor alle gangbare therapeutische behandelingen, waaronder elektrolytische arm- en beenbaden, jet-contrastbaden en jet-wervelbaden, Kneipp en Hauff been- en armcontrastbaden, evenals zitbaden.




De automatische controlefuncties van de arm- en beenbaden maken het de therapeut gemakkelijker. Bijvoorbeeld, de electrogalvanische behandelingen van de vierbekkenbaden (model-nr. 0.9-4 en 0.9-5) met acht verschillende stroominstellingen automatisch geregeld. Het systeem is eenvoudig te gebruiken en de behandelingen kunnen worden gekozen uit 12 voorgeprogrammeerde opties.

Het vierbassinbad, de arm- en beenbaden en de zitbaden bestaan uit hoogwaardig acrylglas en zijn naadloos gevormd.

MODELLEN	4-basin baths			Arm baths			Leg baths			Sitz baths	
	0.9-4	0.9-5	0.9-9	0.8-3	2.19-1	2.17-1	0.9-8	0.8-5	2.15-1	2.9-4	2.9-8
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN											
Elektrogalvanische arm/been baden	•	•									
Jet contrast baden (automatisch gecontroleerd)		•	•				•				
Jet wervel baden (automatisch gecontroleerd)				•				•			
Voet contrast baden	•	•							•		
Arm contrast baden "Kneipp"	•	•			•						
Arm contrast baden "Hauff"						•					
Zitbaden										•	•

Extra modellen en opties zijn op aanvraag verkrijgbaar | Technische wijzigingen voorbehouden.

MODEL 0.9-4

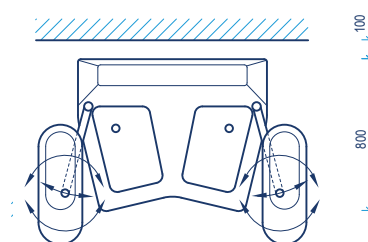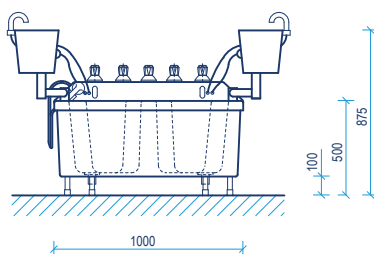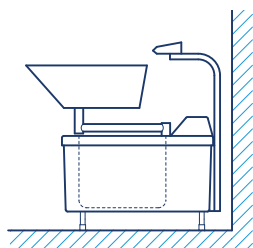

Technische wijzigingen voorbehouden.




MODEL 0.9-4



MODEL 0.8-3




MODEL 0.8-5

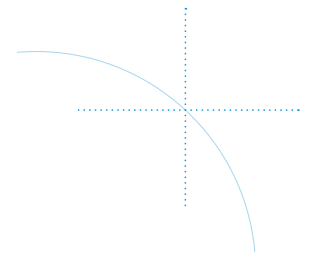

Douche-unit - voor massage, contrast douches of Kneippkuren.

Een compact douchesysteem voor eenvoudige bediening.

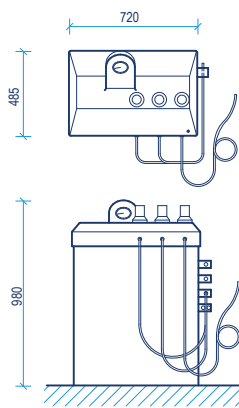

De vrijstaande douche is uitgerust met een goed ontworpen bedieningspaneel dat bestaat uit acrylglas van hoge kwaliteit. Het is voorzien van geïntegreerde armaturen die een exacte temperatuurregeling en een snelle omschakeling van warm naar koud water mogelijk maken.

Het is uitgerust met een drukregelaar en een druk- en temperatuurmeter. Een massageslang, een regendouche en een standaard slang zijn voorzien voor verschillende douchebehandelingen. Het apparaat kan worden gebruikt met vers water of met thermaal en mineraalwater*; een geïntegreerde drukverhoger* is beschikbaar als optionele uitrusting. Het gamma therapeutische douches omvat speciale modellen voor wandinbouw of wandopbouw.



DOUCHE UNIT



JETDOUCHE

Jetdouche - voor drukstraal behandelingen en contrastdouches.

Een systeem voor uitgebreide douchebehandelingen.

De Jet douche is een compleet systeem dat is uitgerust met een bedieningspaneel, hoofddouche, ronde douche en een krukje met een bidetdouche. Dankzij de verschillende onderdelen is de Jet




douche zowel geschikt voor douches voor het hele lichaam als voor afzonderlijke lichaamsdelen.

Alle behandelingen worden geregeld en gecontroleerd via de stand-alone douche-unit. Het handige bedieningspaneel wordt geleverd met geïntegreerde armaturen voor exacte temperatuurregeling en snel omschakelen van warm naar koud water. Het is uitgerust met een drukregelaar en een druk- en temperatuurmeter.



Het flexibele Jet douchesysteem kan gemakkelijk worden aangepast aan de ruimtebeperkingen en functiebehoeften van elke therapeutische setting, bijvoorbeeld door het toevoegen van een drukverhoger*. De horizontale douche VICHY CLASSIC kan ook worden geïntegreerd. Uitgebreide uitrustingsmogelijkheden vullen de systeemkenmerken aan.

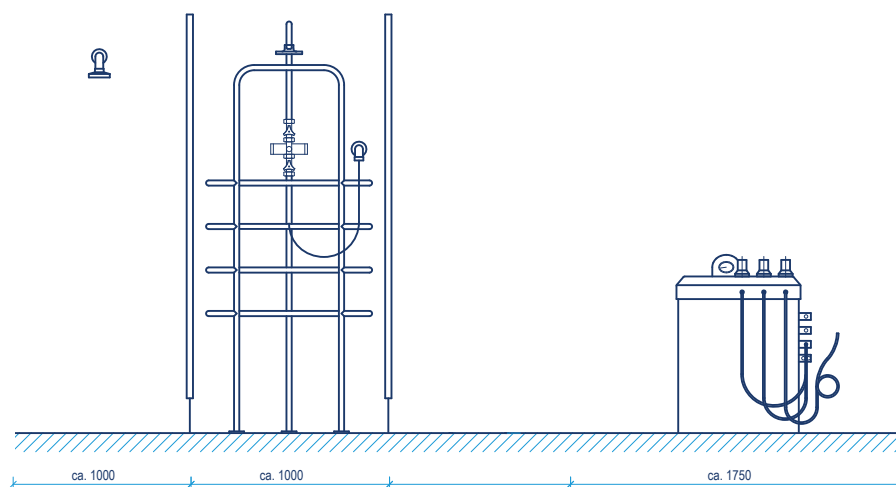

Technische wijzigingen voorbehouden.

* Optional feature

Seitenverkürzung

JOUVENCE – een droog floatation systeem voor lichaamspakkingen.

Het effectieve en kalmerende effect van het warmwaterkussen.





Het droge float systeem JOUVENCE heeft een oppervlak dat kan worden aangepast aan verschillende fasen. Aan het begin van de sessie rust u op een stevig kussen van lucht, dat de perfecte basis vormt voor een lichaamspakking. Zodra de pakking is aangebracht, laat het kussen langzaam lucht om u te laten zakken op een aangenaam verwarmd waterkussen. Door drijven op het waterkussen ontspant het lichaam zich volledig: de pakkingen ontwikkelen hun maximale effect



Wanneer het luchtkussen worden uw benen eerst ondersteund en opgetild om te stabiliseren en uw bloedsomloop te stimuleren.



De bediening van JOUVENCE is eenvoudig en intuïtief dankzij de vijf toetsen op de rand van het bed. De afneembare deken en hoeslaken voor het kussen zijn geurloos en ondoordringbaar voor water, olie en ontsmettingsmiddel. Ze kunnen gewassen worden op 90° C of met stoom gereinigd worden. Het oppervlak is kreukvrij en gemakkelijk te reinigen. De talrijke functies die JOUVENCE biedt, geven u het gevoel in de beste handen te zijn op elk moment van de behandelingssessie.

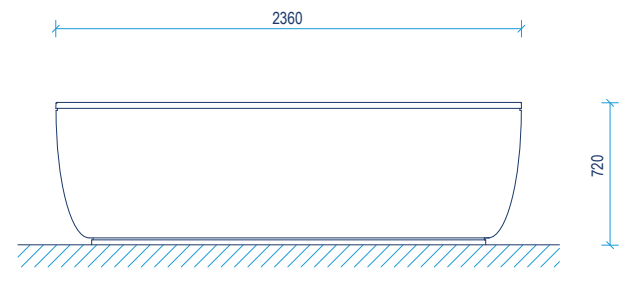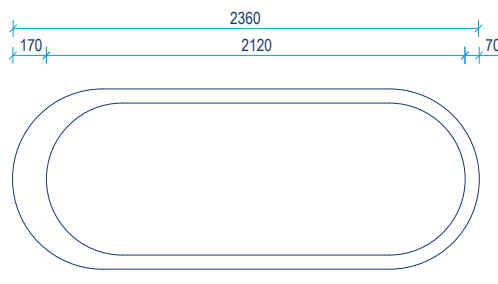

Technische wijzigingen voorbehouden.




DRY FLOATATION SYSTEM JOUVENCE



Fango modder stations - voor het bereiden van fango paraffine.

Professionele werkstations voor kinesiotherapiepraktijken, kuurklinieken of revalidatiecentra. Wij bieden alle units en componenten die nodig zijn voor het bereiden van fango paraffine. De indeling en installatie is flexibel en kan worden aangepast aan uw ruimtelijke beperkingen, therapeutische eisen en verwerkingsvolumes: het

productportfolio omvat roeders, warmhoudkasten en accessoires zoals planken, werkbladen, transportkarren en kasten. Wij beantwoorden graag uw vragen over apparatuur.

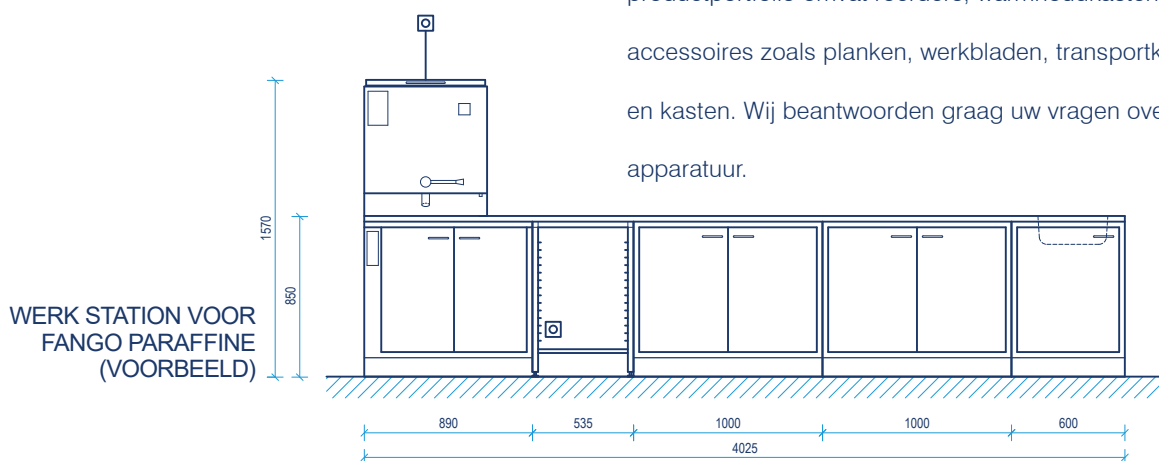

Technische wijzigingen voorbehouden.



FANGO PARAFFINE WERK STATION

Lifter - eenvoudige bediening voor het personeel

en de veiligheid en het comfort van de patiënt tijdens de behandelingen.



Onze liftersystemen zijn een onmisbaar hulpmiddel in klinieken en revalidatiecentra. Daarnaast zijn ze een belangrijk onderdeel voor therapeutische en medische behandelingen, bijv. voor onderwater tractie of baden voor brandwondenslachtoffers. Onze productportfolio omvat verschillende liftersystemen met diverse opties. Wij bieden mobiele of stationaire lifters aan, evenals lifters voor transport, het overbrengen van patiënten en gebruik in baden of douches.


Brandwondenbehandelingsbaden

complete systemen met een lifter. Nauwkeurig ontworpen om aan de speciale behoeften van de behandeling van brandwondenslachtoffers te voldoen.



Deze aangepaste kuipen voor brandwondenpatiënten worden het meest gebruikt voor het reinigen en behandelen van wonden, een proces dat voorzichtig en efficiënt in water kan worden uitgevoerd. Er is een stationaire kuip met groot volume en een compact in hoogte verstelbaar model. Beide kuipen zijn gemaakt van roestvrij staal. Dit materiaal van topkwaliteit is bestand tegen de mechanische eisen van het dagelijkse klinische leven en is gemakkelijk te desinfecteren. De liftsystemen zijn voorzien van recliners en

zijn speciaal ontworpen voor gebruik in brandwondenverzorgingsbaden. EasyCare is een compleet systeem voor de behandeling van acute brandwonden; het bestaat uit een douchebrancard met douchepaneel en afvoerputje.

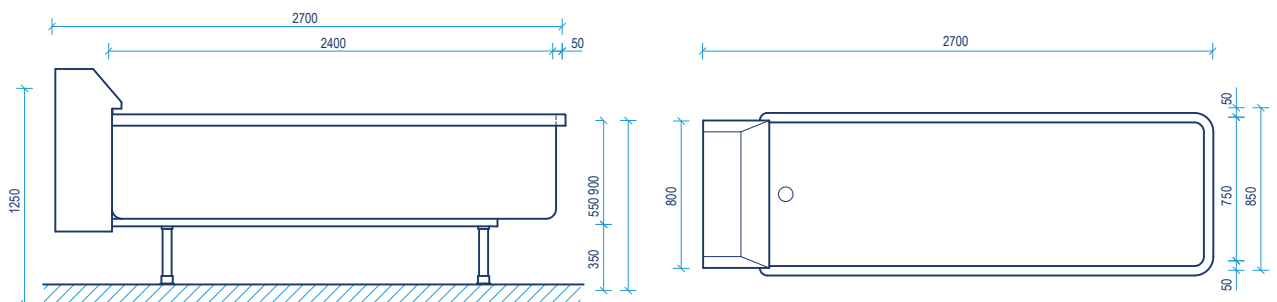

STATIONARY BURN TREATMENT TUB



LIFT MET STRETCHER



LIFT MET STOEL



STATIONAIR BRANDWONDEN BAD



MEDISCHE SYSTEMEN | HYDROTHERAPIE

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

EWAC
MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.