

ONDERWATERLOOPBAND

TECHNISCHE SPECIFICATIES



EWAC

MEDICAL

We get you moving



Product Beschrijving

De Geïntegreerde Onderwaterloopband biedt een ideale omgeving voor oefeningen met verminderd gewicht, een persoonlijke hydrotherapeutische omgeving waar de vooruitgang van de cliënt gemakkelijk kan worden gecontroleerd.

Aan weerszijden van de loopband zijn staanplaatsen voorzien, zodat de gebruiker snel en gemakkelijk van de loopband kan stappen. Goed zichtbare markeringen op de loopband geven de snelheid van de loopband aan en er kunnen ondersteunende handgrepen worden aangebracht voor comfort en veiligheid van de gebruiker.

Functie

Voor het uitvoeren van stationaire loop- en/of loopoefeningen op een vaste plaats in het zwembad voor revalidatie- of trainingsdoeleinden. De regelbare snelheid (tussen 0,2 km p/u en 11 km p/u) stelt de therapeut en de gebruiker in staat de weerstand aan te passen aan de behoeften van de gebruiker, op basis van de fysieke conditie van de gebruiker.

Het bedieningsscherm geeft tijdens het gebruik verschillende waarden weer, zoals de werkelijke snelheid, de afgelegde afstand en de verstreken tijd van de sessie.


De onderwater loopband wordt volledig vlak met het oppervlak van de beweegbare vloer of bodem van het modulaire zwembad geïnstalleerd.

Opties

- Verwijderbare handrails aan beide zijden van de onderwater loopband.
- Touch screen bediening
- Druktoetsbediening
- Afstandsbediening
- Interval trainingsprogramma's

Kenmerken van het product

1. Loopband
2. Staart Roller
3. Teruglooprol
4. Aandrijftrommel
5. Loopbandframe

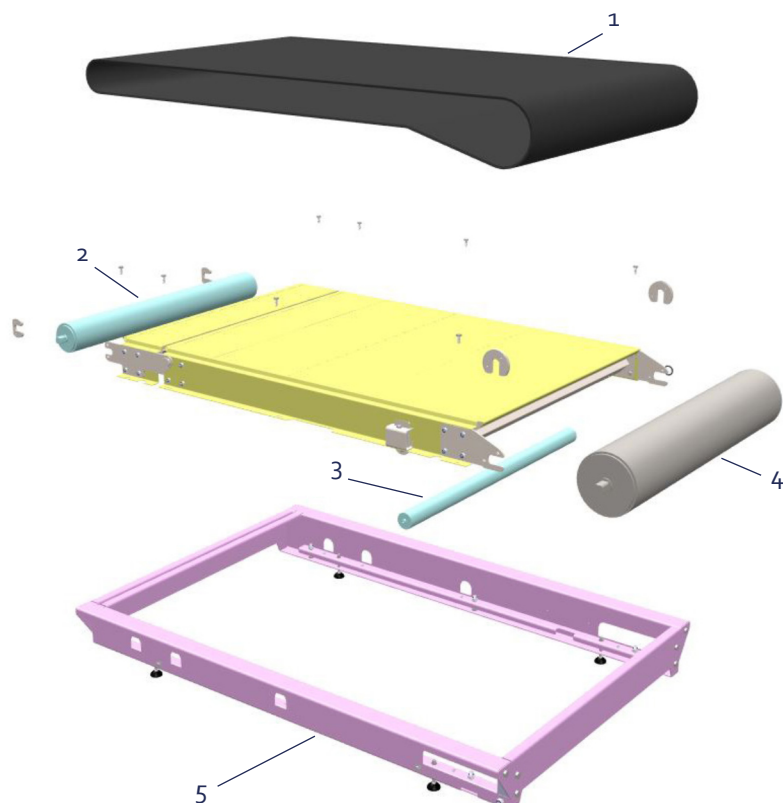

Operationele parameters

Treadmill load capacity, 17V AC Drive	250kg (550lbs) with 50% weight bearing
Treadmill load capacity, 24V DC Drive (option)	175kg (386lbs) with 50% weight bearing
Treadmill speed range, 17V AC Drive	0.2 – 11.0 kph (0.06 – 7mph)
Treadmill speed range, 24V DC Drive (option)	0.8 – 8.0 kph (0.5 – 5 mph)
Recommended water depth	1.0 – 1.3 m

Diensten, vermogens en capaciteiten

Elektrische voeding naar hoofdbedieningspaneel	16 Amp 220/240 Volt Enkele fase 50/60Hz
IP-classificaties, ondergedompelde componenten	IP68
Spanning van LOOPBANDMOTOR	17 V AC
Spanning van LOOPBANDMOTOR (DC OPTIE)	24 V DC
Spanning bij BEDIENINGSPANEEL	12 V DC
Spanning van HOOFDBEDIENINGSPANEEL	220/240 VAC
Max. afstand van hoofdbedieningspaneel tot loopband	10 m
Max. afstand van hoofdbedieningspaneel tot bediening	15 m

Afmetingen en gewicht

Externe afmetingen	1750 x 1200 mm
Loopvlak	1405 x 855 mm
Gewicht	150 kg

Verpakkingsinformatie

Materiaal: Houten kist

Breedte: 1370 mm

Lengte: 2070 mm

Hoogte: 750 mm

Gewicht: 470 kg

EWAC Medical is gecertificeerd volgens:

ISO 9001

Door Lloyd's Register Nederland

